

# Surgi-Patch<sup>®</sup> ANAT T

Anatomique Tricoté

Renfort de Paroi anatomique  
Avec guides couleurs  
**Polyester tricoté**

*Anatomic Wall reinforcement  
With colour guides  
Knitted Polyester*



Polyester


- > Hernies
- > Cœlioscopie
- > *Hernias*
- > *Laparoscopy*



**SURGICAL  
IOC<sup>®</sup>**  
L'alliance pour l'innovation

# Surgi-Patch® ANAT T

## Anatomique Tricoté

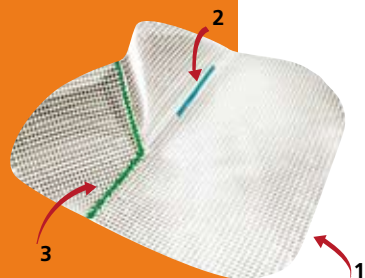


Anatomique gauche  
Left anatomic

La prothèse est disponible en configuration droite ou gauche, avec ou sans fente assortie d'un système de chicane.

The prosthesis is available for both left and right sides, with or without a vent accompanied by a baffle system.

- > La prothèse **Surgi-Patch® ANAT T** est constituée d'un tricot à base de polyester multi-filaments. Ce tricot est préformé afin de s'adapter parfaitement à l'anatomie de la région inguinale. Cette forme anatomique se décompose en 3 parties :
  - > 1 : Une partie antérieure pour la face profonde des muscles de la paroi.
  - > 2 : Une partie postérieure pour les vaisseaux iliaques externe, le psoas et le cordon spermatique.
  - > 3 : Une partie interne orientée vers le bas pour renforcer la région obturatrice au contact de la face externe de la vessie.
- > La mise en place de la prothèse **Surgi-Patch® ANAT T**, est facilitée par 2 repères de couleur pour un ajustement précis :
  - **Repère bleu** placé à l'horizontal le long de l'arcade crurale.
  - **Triangle vert** avec un trait interne en direction de la vessie et un trait couvrant diagonalement les vaisseaux.

- > The **Surgi-patch® ANAT T** prosthesis is composed of a multi-filament polyester knitting. This knitting is pre-shaped in order to adapt perfectly to the anatomy of inguinal region. This anatomic shape can be divided into three parts:
  - > 1 : A front part for the deep surface of muscles in the wall.
  - > 2 : A rear part for the external iliac vessels, the psoas and the spermatic cord.
  - > 3 : An internal part directed downwards to reinforce the obturator region in contact with the external surface of the bladder.
- > Inserting the **Surgi-patch® ANAT T** prosthesis is facilitated by two coloured marks for precise adjustment:
  - **Blue mark**, placed horizontally along the inguinal ligament.
  - **Green triangle** with an internal mark in the direction of the bladder and a mark covering the vessels diagonally.

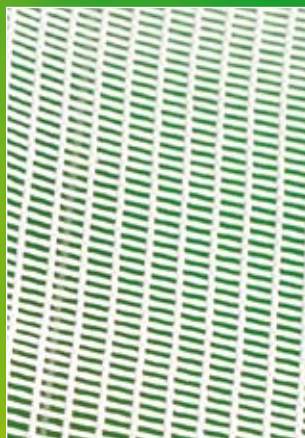

Référence Reference	Côté Side	Taille en cm Size in cm
ANAT 11/15 TAD	Droit ( <i>right</i> )	11 x 15
ANAT 11/15 TAG	Gauche ( <i>left</i> )	11 x 15
ANAT 13/15 TAD	Droit ( <i>right</i> )	13 x 15
ANAT 13/15 TAG	Gauche ( <i>left</i> )	13 x 15

> Toute commande passée avant 16h30 est expédiée le jour même par service express.  
> All orders placed before 4.30 p.m. are dispatched the same day by express service.

> Commandes | Orders : Tel. +33(0)4 77 91 42 00 - Fax. +33(0)4 77 91 42 01



L'alliance pour l'innovation  
[www.surgical-ioc.com](http://www.surgical-ioc.com)